



Autoclaves para esterilización "Presoclave II" 50 y 80

REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO CON LECTURA DIGITAL Y PURGADO ATMOSFÉRICO.
 PARA TEMPERATURAS DESDE 115 °C HASTA 134 °C (0,62 a 2 bar).
 CONFORME A LAS DIRECTIVAS DE APARATOS DE PRESIÓN.
 MODELO VERTICAL. CAPACIDADES: 50 Y 80 LITROS.



SEGURIDAD:

VÁLVULA DE SEGURIDAD: PREVIENE QUE LA PRESIÓN SOBREPASE EL LÍMITE MÁXIMO.
PRESOSTATO DE SEGURIDAD: DESCONECTA LOS CALEFACTORES EN CASO DE SOBREPASAR EL LÍMITE DE PRESIÓN.
TERMOSTATO DE SEGURIDAD: DESCONECTA LA CALEFACCIÓN EN CASO DE SOBRETENPERATURA O FALTA DE AGUA EN EL DEPÓSITO.
DISPOSITIVO TAPA: IMPIDE LA APERTURA DE LA TAPA MIENTRAS LA CÁMARA SE ENCUENTRA BAJO PRESIÓN.
ENVOLVENTE DE PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA TAPA.

Una alternativa económica. Semiautomático.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior y encimera en acero inox.
 Elemento calefactor en acero inox. especial INCOLOY de gran duración, resistente a la corrosión y a la alta temperatura.
 Depósito, tapa y cierre en acero inox.
 Purgado atmosférico automático.
 Sistema de cierre por 6 puntos.

PANEL DE MANDOS



1. Manómetro.
2. Indicador luminoso de alarma.
3. Indicador luminoso de final de ciclo.
4. Indicador luminoso de puerta abierta.
5. Display indicador de temperatura.
6. Display indicador de tiempo.
7. Pulsador de temperatura (rango desde 115 °C hasta 134 °C).
8. Pulsador aumentar valor.
9. Pulsador marcha.
10. Pulsador paro.
11. Pulsador disminuir valor.
12. Pulsador de tiempo (rango desde 3' hasta 99').
13. Mando apertura tapa.



| MODELOS | Código | Capacidad litros | Ø Alto (útiles cm) | Alto / Ancho / Fondo (exterior cm) | Consumo W | Peso Kg |
|------------------|---------|------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| PRESOCLAVE II 50 | 4001725 | 50 | 30 70 | 117 48 62 | 3000 | 75 |
| PRESOCLAVE II 80 | 4002136 | 80 | 40 60 | 107 58 72 | 3600 | 100 |

Se suministran sin cestillos y sin tambores.

ACCESORIOS: Cestillos de alambre y tambores en acero inox. AISI 304.

Para Presoclave II 50 Código: 4001725.

Cabida, 3 cestillos Ø 25,5 y 20 cm alto. Código: 1000495

Para Presoclave II 80, Código: 4002136.

Cabida, 2 cestillos Ø 36 y 28 cm alto. Código: 1000496

Tambores de esterilización en acero inox. AISI 304.

Para Presoclave II 50, Código: 4001725.

Cabida, 3 tambores Ø 25 y 18 cm alto. Código: 1002418


Para Presoclave II 80, Código: 4002136.

Cabida, 2 tambores Ø 35 y 27 cm alto. Código: 1002419

Detergente Bio-Sel.

Destilador de agua especial para autoclaves.

(Ver pág. 89).

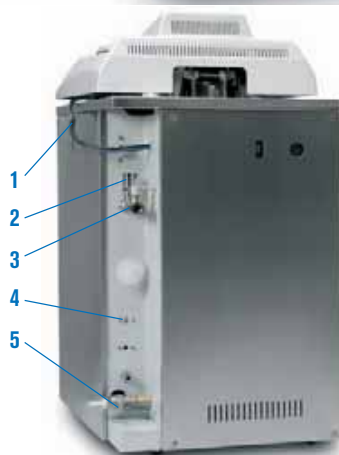

PARTE POSTERIOR

1. Toma de red eléctrica.
2. Válvula de seguridad.
3. Válvula vaciado de vapor.
4. Termostato de seguridad.
5. Válvula selectora de drenaje.

COMPLEMENTO que debe instalarse en fábrica: Sonda Pt 100 para lectura de temperatura (ver pág. 89).